

NaturDent[®]

Liquid Cleanser

Daily Cleansing



Remove your dentures and brush them under running water with a toothbrush.



Drop half or one tablet into warm water. If possible leave the denture in the solution overnight.



Rinse denture under running water.

Dry denture thoroughly before applying **NaturDent** Denture Adhesive.

Cleansing once a week with NaturDent Liquid Cleanser

NaturDent Denture Adhesive contains a patented formula of coniferous resins. Use the NaturDent natural cleansing liquid once a week in order to get rid of the residues of the coniferous resins in a natural way. After cleaning the denture with a cleansing tablet, spray the NaturDent liquid on the dry denture and wait a few minutes. Then spray the liquid on a soft cloth and rub the denture with it.

Your denture will be fresh and clean!

Composition: Alcohol, Ricinus Communis Oil (Castor Oil), Melaleuca Alternifolia Oil (Tea Tree Oil).



NaturDent®


Denture Adhesive

Directions for Use:



1. Clean and dry your dentures thoroughly. **NaturDent** can only develop its full adhesive power when the dentures are completely dry.

2. Apply **NaturDent** to your dentures in strips (as shown in the diagram), making sure that the adhesive is not too close to the edge of the denture.

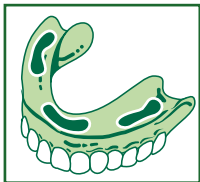

3. To avoid clogging, close tube tightly immediately after use.

4. Insert dentures into mouth and bite firmly.

5. For best result wait 10 min. before eating or drinking.

Helpful Hints:

- It may take a few trials to see what amount of **NaturDent** adhesive is ideal. First begin by using a small amount. Increase as needed to achieve a long lasting bond.
- If you wish an even stronger bond, spread adhesive to create a thin and even layer over the entire contact area.
- If at the end of the day the bonding effect has not lessened, simply leave dentures in the mouth overnight. Apply less adhesive next day.
- Consult your dentist regularly to ensure proper fitting dentures.
- Close tube tightly immediately after use.

Composition: Sodium Carboxymethylcellulose, Solution of Polyvinylacetate, Ester of Wood Rosin, Coconut Oil, Silica.

Store at room temperature!



Manufacturer: Fittydent International GmbH, A-7423 Pinkafeld, Austria
www.fittydent.com

NaturDent®

Flüssigreiniger

Tägliche Reinigung



Zahnprothese unter fließendem Wasser mit einer Bürste reinigen.



Eine halbe oder eine Tablette in ein Glas warmes Wasser geben, nicht umrühren. Prothese einlegen und darauf achten, dass sie vollständig mit Wasser bedeckt ist.

Wenn möglich die Prothese über Nacht im Reinigungsbad belassen.



Danach die Prothese unter fließendem Wasser gut abspülen. Prothese gut trocknen, bevor **NaturDent** Haftcreme verwendet wird.

Die wöchentliche Reinigung mit dem NaturDent Flüssigreiniger

Die **NaturDent** Haftcreme enthält eine patentierte Mischung aus natürlichen Koniferenharzen. Zur restlosen, natürlichen Entfernung der Kleberreste der Koniferenharze verwenden Sie den **NaturDent** Flüssigreiniger 1x pro Woche:

Nach der Reinigung mit einer Reinigungstablette besprühen Sie die trockene Prothese mit dem **NaturDent** Flüssigreiniger und lassen diesen kurz einwirken. Danach sprühen Sie den **NaturDent** Flüssigreiniger auf ein weiches Tuch und reiben damit die Prothese ab. Ihre Dritten strahlen wieder in neuem Glanz!

Bestandteile: Alcohol, Ricinus Communis Oil (Castor Oil), Melaleuca Alternifolia Oil (Tea Tree Oil).



NaturDent®

Haftcreme

Gebrauchsinformation:



1. Zahnprothese reinigen und vollständig trocknen. **NaturDent** kann die ganze Haftkraft nur auf einer vollständig trockenen Prothese entfalten.
2. **NaturDent** in dünnen Streifen auf die Zahnprothese auftragen (siehe Abbildung). **NaturDent** Haftcreme nicht zu nahe am Rand der Prothese auftragen.
3. Nach Gebrauch Tube sofort sorgfältig verschließen.
4. Prothese wie gewohnt einsetzen - Zähne kurz und kräftig zusammenbeißen. Möglichst 10 Minuten nicht essen oder trinken.

Hinweise:

- Da jeder Kiefer unterschiedlich beschaffen ist, sollten Sie die für Sie notwendige Menge an Haftcreme selbst bestimmen. Dazu anfangs eine geringe Menge an **NaturDent** Haftcreme auftragen, in den nächsten Tagen solange steigern, bis der ideale Klebeeffekt erzielt ist.
- Wenn Sie einen stärkeren Halt wünschen, verteilen Sie die Haftcreme in einer dünnen Schicht über die ganze Prothese.
- Wenn die Haftkraft bis am Abend nicht nachlässt, Prothese einfach über Nacht tragen. Am nächsten Tag eine geringere Menge **NaturDent** Haftcreme verwenden.
- Besuchen Sie regelmäßig Ihren Zahnarzt, um einen korrekten Sitz Ihrer Prothese zu gewährleisten.
- Verschließen Sie die Tube sorgfältig nach Gebrauch.

Bestandteile: Sodium Carboxymethylcellulose, Solution of Polyvinylacetate, Ester of Wood Rosin, Coconut Oil, Silica.

Lagerung bei Raumtemperatur!

Hersteller: Fittydent International GmbH, A-7423 Pinkafeld, Austria
www.fittydent.com

